

GL STAB

INDICATIES:

- Chondritis
- Licht knieschijfsyndroom
- Lichte chronische slapheid van de gewrichtsbanden
- Residueel traumatisch oedeem
- Beginnende artrose

KENMERKEN:

De GL Stab kniebrace wordt gemaakt op een recht frame en wordt anatomisch gevormd en biedt daardoor een optimaal comfort, waarbij de risico's op het kneveleffect zoveel mogelijk worden beperkt.

Compressie van klasse 3.

Gebreide stof met gedifferentieerde compressiezones.

Beperkte compressie op de knieschijf.

Uitsparing ter hoogte van de knieschijf met het oog op een doeltreffende ondersteuning van de knieschijf. Soepele gebreide stof ter hoogte van de knieholte, om strictieverschijnselen en het kneveleffect te voorkomen.

CONTRA-INDICATIES:

- Bij sommige vervormingen kan geen standaardbrace worden gebruikt
- P.A.D. (perifere arteriële aandoening)
- Mag niet rechtstreeks in contact staan met een huidletsel

GEBRUIK:

Schuif de kniebrace over het been tot de uitsparing voor de knieschijf boven de knieschijf komt te liggen. Stel de kniebrace indien nodig bij, zodat een optimaal comfort wordt bereikt.

VOORZORGSMAATREGELEN:

Leef het advies na van de arts die het product heeft voorgeschreven of geleverd. Neem contact op met uw arts als u twijfels hebt over het gebruik of de ongemakken waarmee u kampt.

De brace is bedoeld voor persoonlijk gebruik.

Neem contact op met de fabrikant en de bevoegde autoriteit in geval van een ernstig incident dat ontstaat naar aanleiding van gebruik van dit hulpmiddel.

Houd u bij het weggooiën van het product strikt aan de wettelijke voorschriften in uw regio.

ONDERHOUD:

Was de brace in water met een neutrale, niet-agressieve zeep met een temperatuur van 40 °C.

Spoel de brace met veel water, wring hem niet uit en laat hem plat liggend drogen, ver genoeg van elke warmtebron. Niet strijken.

PRESENTATIE:


7 maten: (omtrek bovenbeen en half gebogen knie)

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| - Maat 1: 38 – 40 cm en 30 – 32 cm | - Maat 5: 53 – 57 cm en 42 – 44 cm |
| - Maat 2: 41 – 43 cm en 33 – 35 cm | - Maat 6: 58 – 62 cm en 45 – 49 cm |
| - Maat 3: 44 – 47 cm en 36 – 38 cm | - Maat 7: 63 – 67 cm en 50 – 54 cm |
| - Maat 4: 48 – 52 cm en 39 – 41 cm | |

SAMENSTELLING:

Polyamide 78 % - Elastodien 17 % - Elastaan 3 % - Silicone 1 % - Polyester 0,5 % - Polyurethaan 0,5 %

NL

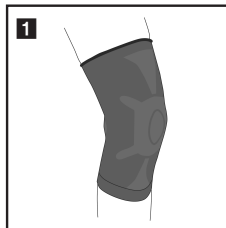

FR

GL STAB

INDICATIONS :

- Chondrite
- Syndrome rotulien léger
- Laxité ligamentaire chronique légère
- Œdème traumatique résiduel
- Arthrose débutante

CARACTERISTIQUES :

Réalisées sur métier rectiligne, préformées anatomiquement, la genouillère GL Stab apporte un confort optimal en limitant les risques d'effet garrot.

Compression de classe 3.

Tricotage avec zones de compression différenciées.

Compression limitée sur la patella.

Evidement rotulien pour un maintien efficace de la rotule.

Tricotage souple au niveau du creux poplité pour supprimer les phénomènes de striction et effets garrot.

CONTRE-INDICATIONS :

- Certaines déformations ne permettent pas la mise en place d'une attelle de série
- A.O.M.I (Artériopathie Oblitérante du Membre Inférieur)
- Ne doit pas être directement en contact avec une lésion cutanée

MISE EN PLACE :

Enfiler la genouillère jusqu'à placer l'évidement rotulien sur la rotule.

Ajuster la genouillère si nécessaire pour un confort optimal.

PRÉCAUTIONS :

Suivre les conseils du professionnel de santé qui a prescrit ou délivré le produit. En cas de doute sur l'utilisation ou d'inconfort, consulter votre professionnel de santé.

L'orthèse est à usage personnel.

Contacter le fabricant et l'autorité compétente en cas d'incident grave découlant de l'utilisation de ce dispositif.

Pour jeter le produit, respectez strictement les réglementations légales de votre région.

ENTRETIEN :

Lavage à la main dans une eau à 40° avec un savon neutre, non agressif.

Rincer abondamment sans essorer, et laisser sécher à plat, à l'abri d'une source de chaleur excessive.

Ne pas repasser.

PRESENTATION :

7 tailles : (Circonférence cuisse et genou semi-fléchi)

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| - Taille 1 : 38 – 40 cm et 30 – 32 cm | - Taille 5 : 53 – 57 cm et 42 – 44 cm |
| - Taille 2 : 41 – 43 cm et 33 – 35 cm | - Taille 6 : 58 – 62 cm et 45 – 49 cm |
| - Taille 3 : 44 – 47 cm et 36 – 38 cm | - Taille 7 : 63 – 67 cm et 50 – 54 cm |
| - Taille 4 : 48 – 52 cm et 39 – 41 cm | |

COMPOSITION :

Polyamide 78% - Elastodiène 17% - Elasthanne 3% - Silicone 1% - Polyester 0.5% - Polyuréthane 0.5%

CIZETA MEDICALI France SAS
109, rue de la Brasserie - 18200 SAINT AMAND MONTROND
Tel. 02 48 96 87 93 - Fax. 02 48 96 80 91
www.cizetamedicali.fr

Capital social 684 000 €
SIRET 398 197 863 00069 APE 4646Z
N° TVA FR92398197863 RCS BOURGES B398 197 863



10/2023



GL STAB

INDICATIONS:

- Chondritis
- Mild patella syndrome
- Mild chronic ligament laxity
- Residual post-traumatic oedema
- Osteoarthritis onset

FEATURES:

Created on a flat loom and anatomically pre-shaped, the GL Stab knee brace provides optimal comfort by reducing the risk of a tourniquet effect.
Class 3 compression.
Knitted fabric with distinct compression zones.
Limited compression on the patella.
Patella recess for effectively maintaining the kneecap's position.
Soft knitted fabric at the popliteal fossa to eliminate stricture and the tourniquet effect.

CONTRAINDICATIONS:

- Some deformities cannot be accommodated by standard splints
- A.O.L.L (Arteriosclerosis Obliterans of the Lower Limbs)
- Must not come into direct contact with broken skin

FITTING THE DEVICE:

Pull on the knee brace until the patella recess is positioned on the kneecap.
Adjust the knee brace, as needed, for optimal comfort.

PRECAUTIONS:

Follow the advice of the health professional who prescribed or supplied the product. If there is doubt regarding use, or discomfort, consult your health professional.
The orthotic device is for personal use.
Contact manufacturer and competent authority in case of a serious incident arising due to usage of this device.
To throw away the product, respect strictly the legal regulations of your region.

MAINTENANCE:

Hand wash in 40° water with mild, neutral soap.
Rinse thoroughly without spinning, and lay flat to dry, away from excessive heat.
Do not iron.

PRESENTATION:

- 7 sizes: (Circumference of thigh and half-bent knee)
- Size 1: 38 – 40 cm and 30 – 32 cm
 - Size 2: 41 – 43 cm and 33 – 35 cm
 - Size 3: 44 – 47 cm and 36 – 38 cm
 - Size 4: 48 – 52 cm and 39 – 41 cm
 - Size 5: 53 – 57 cm and 42 – 44 cm
 - Size 6: 58 – 62 cm and 45 – 49 cm
 - Size 7: 63 – 67 cm and 50 – 54 cm

MATERIALS:

Polyamide 78% - Elastodiene 17% - Elastane 3% - Silicone 1% - Polyester 0.5% - Polyurethane 0.5%

ENG

GL STAB

INDICAZIONI:

- Condrite
- Sindrome rotulea lieve
- Lassità dei legamenti cronica leggera
- Edema traumatico residuale
- Artrosi incipiente

CARATTERISTICHE:

Realizzata su telaio rettilineo e preformata anatomicamente, la ginocchiera GL Stab garantisce un comfort ottimale, limitando i rischi di effetto laccio emostatico.
Compressione di classe 3.
Maglia con zone a compressione differenziata.
Compressione limitata sulla rotula.
Incavo rotuleo per un contenimento efficace della rotula.
Maglia morbida a livello del cavo popliteo per evitare fenomeni di strizione ed effetti di laccio emostatico.

CONTROINDICAZIONI:

- Certe deformazioni non permettono il posizionamento di una stecca di serie
- A.O.A.I (Arteriopatia Obliterante dell'Arto Inferiore)
- L'ortesi non deve essere direttamente a contatto con una lesione cutanea

POSIZIONAMENTO:

Infilare la ginocchiera fino a posizionare l'incavo rotuleo sulla rotula.
Aggiustare la ginocchiera se necessario per un comfort ottimale.

PRECAUZIONI:

Seguire i consigli del professionista sanitario che ha prescritto o consegnato il prodotto. In caso di dubbio sull'utilizzazione o di disagio, consultare il professionista sanitario.
L'ortesi è a uso personale.
Contattare il produttore e l'autorità competente in caso di gravi incidenti dovuti all'uso di questo dispositivo.
Per gettare il prodotto, rispettare rigorosamente le norme di legge della propria regione.

MANUTENZIONE:

Lavare a mano in acqua a 40 °C con un sapone neutro, non aggressivo.
Risciacquare abbondantemente senza strizzare e lasciare asciugare a piatto al riparo da una fonte di calore eccessiva.
Non stirare

PRESENTAZIONE:

- 7 taglie: (Circonferenza coscia e ginocchio semiflesso)
- Taglia 1: 38 – 40 cm e 30 – 32 cm
 - Taglia 2: 41 – 43 cm e 33 – 35 cm
 - Taglia 3: 44 – 47 cm e 36 – 38 cm
 - Taglia 4: 48 – 52 cm e 39 – 41 cm
 - Taglia 5: 53 – 57 cm e 42 – 44 cm
 - Taglia 6: 58 – 62 cm e 45 – 49 cm
 - Taglia 7: 63 – 67 cm e 50 – 54 cm

COMPOSIZIONE:

Poliammide 78% - Elastodiene 17% - Elastane 3% - Silicone 1% - Poliestere 0,5% - Poliuretano 0,5%

IT

GL STAB

INDIKATIONEN:

- Chondritis (Knorpelentzündung)
- Leichtes Knie Scheibensyndrom
- Leichte chronische Bandlaxizität
- Traumatisches Restödem
- Beginnende Arthrose

EIGENSCHAFTEN:

Die Flachgestrickte, anatomisch vorgeformte Kniestütze GL Stab bietet optimalen Komfort und verringert gleichzeitig die Risiken des „Druckverbandeffekts“.
Kompressionsklasse 3.
Strickgewebe mit Kompressionszonen verschiedener Stärke.
Begrenzter Druck auf der Patella.
Knie Scheibenaussparung für effektive Stabilisierung der Knie Scheibe.
Weiches Strickgewebe im Bereich der Kniekehle, um Einschnürungserscheinungen und Druckverbandeffekte zu vermeiden.

KONTRAINDIKATIONEN:

- Bestimmte Deformationen erlauben nicht das Anlegen einer serienmäßigen Stützschiene
- AVK (Arterielle Verschlusskrankheit der unteren Extremitäten)
- Darf nicht direkt mit einer Hautverletzung in Berührung kommen

ANLEGEN:

Die Kniestütze überziehen, bis sich die Knie Scheibenaussparung auf der Knie Scheibe befindet.
Gegebenenfalls die Kniestütze für optimalen Komfort anpassen.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Befolgen Sie die Hinweise der medizinischen Fachperson, die Ihnen das Produkt verschrieben oder ausgehändigt hat. Bei Unklarheit über den Gebrauch oder schlechten Tragekomfort fragen Sie Ihre medizinische Fachperson um Rat.
Die Orthese ist für den persönlichen Gebrauch bestimmt.
Den Hersteller und die zuständige Behörde benachrichtigen, falls es durch die Verwendung dieses Produkts zu einem schwerwiegenden Vorfall kommt.
Halten Sie sich bei der Entsorgung des Produkts strikt an die gesetzlichen Bestimmungen in Ihrer Region.

WARTUNG:

Handwäsche in 40°C warmem Wasser mit neutraler, nicht aggressiver Seife.
Gründlich spülen ohne Auswringen, liegend trocknen lassen, nicht übermäßiger Hitze aussetzen.
Nicht bügeln.

VERFÜGBARE MODELLE:

- 7 Größen: (Umfang Oberschenkel und halb gebeugtes Knie)
- Größe 1: 38 – 40 cm und 30 – 32 cm
 - Größe 2: 41 – 43 cm und 33 – 35 cm
 - Größe 3: 44 – 47 cm und 36 – 38 cm
 - Größe 4: 48 – 52 cm und 39 – 41 cm
 - Größe 5: 53 – 57 cm und 42 – 44 cm
 - Größe 6: 58 – 62 cm und 45 – 49 cm
 - Größe 7: 63 – 67 cm und 50 – 54 cm

ZUSAMMENSETZUNG:

Polyamid 78% - Elastodien 17% - Elasthan 3% - Silikon 1% - Polyester 0,5% - Polyurethan 0,5%

D

