

PATELLA STAB

INDICATIES:

- Chondritis
- Knieschijfsyndroom (Osgood Schlatter, femoro-patellaire artrose, knieschijfchondritis, knieschijfontwrichting...)
- Lichte chronische slapheid van de gewrichtsbanden
- Residueel traumatisch oedeem
- Beginnende artrose
- Hernemen van sportactiviteiten

KENMERKEN:

De Patella Stab kniebrace wordt gemaakt op een recht frame en wordt anatomisch gevormd en biedt daardoor een optimaal comfort, waarbij de risico's op het kneveleffect zoveel mogelijk worden beperkt.

Compressie van klasse 3.

Gebreide stof met gedifferentieerde compressiezones.

Beperkte compressie op de knieschijf.

Innoverende vorm van de knieschijftring.

Knieschijftring die de actieve hercentering van de knieschijf stimuleert.

Uitsparing ter hoogte van de knieschijf met het oog op een doeltreffende ondersteuning van de knieschijf.

Soepele gebreide stof ter hoogte van de knieholte, om strictieverschijnselen en het kneveleffect te voorkomen.

CONTRA-INDICATIES:

- Bij sommige vervormingen kan geen standaardbrace worden gebruikt
- P.A.D. (perifere arteriële aandoening)
- Mag niet rechtstreeks in contact staan met een huidletsel

GEBRUIK:

Schuif de kniebrace over het been tot de knieschijf in het midden van de knieschijftring komt te liggen.

Stel de kniebrace indien nodig bij, zodat een optimaal comfort wordt bereikt.

VOORZORGSMAATREGELEN:

Leef het advies na van de arts die het product heeft voorgeschreven of geleverd. Neem contact op met uw arts als u twijfels hebt over het gebruik of de ongemakken waarmee u kampt.

De brace is bedoeld voor persoonlijk gebruik.

Neem contact op met de fabrikant en de bevoegde autoriteit in geval van een ernstig incident dat ontstaat naar aanleiding van gebruik van dit hulpmiddel.

Houd u bij het weggooien van het product strikt aan de wettelijke voorschriften in uw regio.

ONDERHOUD:

Was de brace in water met een neutrale, niet-agressieve zeep met een temperatuur van 40 °C.

Spoel de brace met veel water, wring hem niet uit en laat hem plat liggend drogen, ver genoeg van elke warmtebron.

Niet strijken.

PRESENTATIE:


7 maten: (omtrek bovenbeen en half gebogen knie)

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| - Maat 1: 38 – 40 cm en 30 – 32 cm | - Maat 5: 53 – 57 cm en 42 – 44 cm |
| - Maat 2: 41 – 43 cm en 33 – 35 cm | - Maat 6: 58 – 62 cm en 45 – 49 cm |
| - Maat 3: 44 – 47 cm en 36 – 38 cm | - Maat 7: 63 – 67 cm en 50 – 54 cm |
| - Maat 4: 48 – 52 cm en 39 – 41 cm | |

SAMENSTELLING:

Polyamide 70 % - Elastodieen 15 % - Polyurethaan 7 % - Polyester 3 % - Elastaan 3 % - Silicone 2 %

NL

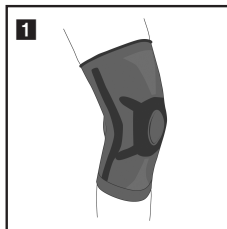

CIZETA MEDICALI France SAS
109, rue de la Brasserie - 18200 SAINT AMAND MONTROND
Tel. 02 48 96 87 93 - Fax. 02 48 96 80 91
www.cizetamedicali.fr

Capital social 684 000 €
SIRET 398 197 863 00069 APE 4646Z
N° TVA FR92398197863 RCS BOURGES B398 197 863



10/2023



SCIENCE & MEDICAL
QUALITY

PATELLA STAB

INDICATIONS :

- Chondrite
- Syndrome rotulien (Osgood Schlatter, arthrose fémoro-patellaire, chondrite patellaire, luxation patellaire...)
- Laxité ligamentaire chronique légère
- Œdème traumatique résiduel
- Arthrose débutante
- Reprise des activités sportives

CARACTERISTIQUES :

Réalisées sur métier rectiligne, préformées anatomiquement, la genouillère Patella Stab apporte un confort optimal en limitant les risques d'effort garrot.

Compression de classe 3.

Tricotage avec zones de compression différenciées.

Compression limitée sur la patella.

Forme innovante de l'anneau patellaire.

Anneau patellaire stimulant le recentrage actif de la rotule.

Evidemment rotulien pour un maintien efficace de la rotule.

Tricotage souple au niveau du creux poplité pour supprimer les phénomènes de striction et effets garrot.

CONTRE-INDICATIONS :

- Certaines déformations ne permettent pas la mise en place d'une attelle de série
- A.O.M.I (Artériopathie Oblitérante du Membre Inférieur)
- Ne doit pas être directement en contact avec une lésion cutanée

MISE EN PLACE :

Enfiler la genouillère jusqu'à placer la rotule au centre de l'anneau patellaire.

Ajuster la genouillère si nécessaire pour un confort optimal.

PRÉCAUTIONS :

Suivre les conseils du professionnel de santé qui a prescrit ou délivré le produit. En cas de doute sur l'utilisation ou d'inconfort, consulter votre professionnel de santé.

L'orthèse est à usage personnel.

Contacter le fabricant et l'autorité compétente en cas d'incident grave découlant de l'utilisation de ce dispositif.

Pour jeter le produit, respectez strictement les réglementations légales de votre région.

ENTRETIEN :

Lavage à la main dans une eau à 40° avec un savon neutre, non agressif.

Rincer abondamment sans essorer, et laisser sécher à plat, à l'abri d'une source de chaleur excessive.

Ne pas repasser.



PRÉSENTATION :

7 tailles : (Circonférence cuisse et genou semi-fléchi)

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| - Taille 1 : 38 – 40 cm et 30 – 32 cm | - Taille 5 : 53 – 57 cm et 42 – 44 cm |
| - Taille 2 : 41 – 43 cm et 33 – 35 cm | - Taille 6 : 58 – 62 cm et 45 – 49 cm |
| - Taille 3 : 44 – 47 cm et 36 – 38 cm | - Taille 7 : 63 – 67 cm et 50 – 54 cm |
| - Taille 4 : 48 – 52 cm et 39 – 41 cm | |

COMPOSITION :

Polyamide 70% - Elastodiène 15% - Polyuréthane 7% - Polyester 3% - Elasthanne 3% - Silicone 2%

PATELLA STAB

INDICATIONS:

- Chondritis
- Patella syndrome (Osgood Schlatter's disease, patellofemoral osteoarthritis, patellar chondritis, patellar dislocation...)
- Mild chronic ligament laxity
- Residual post-traumatic oedema
- Osteoarthritis onset
- Resumption of sporting activities

FEATURES:

Created on a flat loom and anatomically pre-shaped, the Patella Stab knee brace provides optimal comfort by reducing the risk of a tourniquet effect.
Class 3 compression.
Knitted fabric with distinct compression zones.
Limited compression on the patella.
Innovatively shaped patella ring.
Patella ring stimulating active realignment of the kneecap.
Patella recess for effectively maintaining the kneecap's position.
Soft knitted fabric at the popliteal fossa to eliminate stricture and the tourniquet effect.

CONTRAINDICATIONS:

- Some deformities cannot be accommodated by standard splints
- A.O.L.L. (Arteriosclerosis Obliterans of the Lower Limbs)
- Must not come into direct contact with broken skin

FITTING THE DEVICE:

Pull on the knee brace until the kneecap is positioned in the centre of the patella ring.
Adjust the knee brace, as needed, for optimal comfort.

PRECAUTIONS:

Follow the advice of the health professional who prescribed or supplied the product. If there is doubt regarding use, or discomfort, consult your health professional.
The orthotic device is for personal use.
Contact manufacturer and competent authority in case of a serious incident arising due to usage of this device.
To throw away the product, respect strictly the legal regulations of your region.

MAINTENANCE:

Hand wash in 40° water with mild, neutral soap.
Rinse thoroughly without spinning, and lay flat to dry, away from excessive heat.
Do not iron.

PRESENTATION:

7 sizes: (Circumference of thigh and half-bent knee)

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| - Size 1: 38 – 40 cm and 30 – 32 cm | - Size 5: 53 – 57 cm and 42 – 44 cm |
| - Size 2: 41 – 43 cm and 33 – 35 cm | - Size 6: 58 – 62 cm and 45 – 49 cm |
| - Size 3: 44 – 47 cm and 36 – 38 cm | - Size 7: 63 – 67 cm and 50 – 54 cm |
| - Size 4: 48 – 52 cm and 39 – 41 cm | |

MATERIALS:

Polyamide 70% - Elastodiene 15% - Polyurethane 7% - Polyester 3% - Elastane 3% - Silicone 2%

PATELLA STAB

INDICAZIONI:

- Condrite
- Sindrome rotulea (Osgood Schlatter, artrosi femoro-patellare, condrite patellare, lussazione patellare...)
- Lassità dei legamenti cronica leggera
- Edema traumatico residuale
- Artrosi incipiente
- Ripresa delle attività sportive

CARATTERISTICHE:

Realizzata su telaio rettilineo e preformata anatomicamente, la ginocchiera Patella Stab garantisce un comfort ottimale, limitando i rischi di effetto laccio emostatico.
Compressione di classe 3.
Maglia con zone a compressione differenziata.
Compressione limitata sulla patella.
Forma innovativa dell'anello patellare.
Anello patellare che stimola il ricentraggio attivo della rotula.
Incavo rotuleo per un contenimento efficace della rotula.
Maglia morbida a livello del cavo popliteo per evitare fenomeni di strizione ed effetti di laccio emostatico.

CONTROINDICAZIONI:

- Certe deformazioni non permettono il posizionamento di una stecca di serie
- A.O.A.I (Arteriotopia Obliterante dell'Arto Inferiore)
- L'ortesi non deve essere direttamente a contatto con una lesione cutanea

POSIZIONAMENTO:

Infilare la ginocchiera fino a collocare la rotula al centro dell'anello patellare.
Aggiustare la ginocchiera se necessario per un comfort ottimale.

PRECAUZIONI:

Seguire i consigli del professionista sanitario che ha prescritto o consegnato il prodotto. In caso di dubbio sull'utilizzazione o di disagio, consultare il professionista sanitario.
L'ortesi è a uso personale.
Contattare il produttore e l'autorità competente in caso di gravi incidenti dovuti all'uso di questo dispositivo.
Per gettare il prodotto, rispettare rigorosamente le norme di legge della propria regione.

MANUTENZIONE:

Lavare a mano in acqua a 40 °C con un sapone neutro, non aggressivo.
Risciacquare abbondantemente senza strizzare e lasciare asciugare a piatto al riparo da una fonte di calore eccessiva.
Non stirare.

PRESENTAZIONE:

7 taglie: (Circonferenza coscia e ginocchio semiflesso)

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| - Taglia 1: 38 – 40 cm e 30 – 32 cm | - Taglia 5: 53 – 57 cm e 42 – 44 cm |
| - Taglia 2: 41 – 43 cm e 33 – 35 cm | - Taglia 6: 58 – 62 cm e 45 – 49 cm |
| - Taglia 3: 44 – 47 cm e 36 – 38 cm | - Taglia 7: 63 – 67 cm e 50 – 54 cm |
| - Taglia 4: 48 – 52 cm e 39 – 41 cm | |

COMPOSIZIONE:

Poliammide 70% - Elastodiene 15% - Poliuretano 7% - Poliestere 3% - Elastane 3% - Silicone 2%

PATELLA STAB

INDIKATIONEN:

- Chondritis (Knorpelentzündung)
- Kniescheibensyndrom (Osgood Schlatter, Femoropatellararthrose, Chondritis der Kniescheibe, Patellaluxation...)
- Leichte chronische Bandlaxizität
- Traumatisches Restödem
- Beginnende Arthrose
- Wiederaufnahme sportlicher Aktivitäten

EIGENSCHAFTEN:

Die flachgestrickte, anatomisch vorgeformte Kniestütze Patella Stab bietet optimalen Komfort und verringert gleichzeitig die Risiken des „Druckverbandeffekts“.
Kompressionsklasse 3.
Strickgewebe mit Kompressionszonen verschiedener Stärke.
Begrenzter Druck auf der Patella.
Innovative Form des Patellarings.
Patellaring, der die aktive Wiederzentrierung der Kniescheibe anregt.
Kniescheibenaussparung für effektive Stabilisierung der Kniescheibe.
Weiches Strickgewebe im Bereich der Kniekehle, um Einschnürungserscheinungen und Druckverbandeffekte zu vermeiden.

KONTRAINDIKATIONEN:

- Bestimmte Deformationen erlauben nicht das Anlegen einer serienmäßigen Stützschiene
- AVK (Arterielle Verschlusskrankheit der unteren Extremitäten)
- Darf nicht direkt mit einer Hautverletzung in Berührung kommen

ANLEGEN:

Die Kniestütze überziehen, bis sich die Kniescheibe in der Mitte des Patellarings befindet.
Gegebenenfalls die Kniestütze für optimalen Komfort anpassen.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Befolgen Sie die Hinweise der medizinischen Fachperson, die Ihnen das Produkt verschrieben oder ausgehändigt hat. Bei Unklarheit über den Gebrauch oder schlechten Tragekomfort fragen Sie Ihre medizinische Fachperson um Rat.
Die Orthese ist für den persönlichen Gebrauch bestimmt.
Den Hersteller und die zuständige Behörde benachrichtigen, falls es durch die Verwendung dieses Produkts zu einem schwerwiegenden Vorfall kommt.
Halten Sie sich bei der Entsorgung des Produkts strikt an die gesetzlichen Bestimmungen in Ihrer Region.

WARTUNG:

Handwäsche in 40°C warmem Wasser mit neutraler, nicht aggressiver Seife.
Gründlich spülen ohne Auswringen, liegend trocknen lassen, nicht übermäßiger Hitze aussetzen.
Nicht bügeln.

VERFÜGBARE MODELLE:

7 Größen: (Umfang Oberschenkel und halbgebeugtes Knie)

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| - Größe 1: 38 – 40 cm und 30 – 32 cm | - Größe 5: 53 – 57 cm und 42 – 44 cm |
| - Größe 2: 41 – 43 cm und 33 – 35 cm | - Größe 6: 58 – 62 cm und 45 – 49 cm |
| - Größe 3: 44 – 47 cm und 36 – 38 cm | - Größe 7: 63 – 67 cm und 50 – 54 cm |
| - Größe 4: 48 – 52 cm und 39 – 41 cm | |

ZUSAMMENSETZUNG:

Polyamid 70% - Elastodien 15% - Polyurethan 7% - Polyester 3% - Elasthan 3% - Silikon 2%