

PERFO UNI 3

NL

INDICATIES:

- Trauma van de knie
- Verstuiking
- Naverking van breuken
- Postoperatieve ondersteuning
- Rusten (artritis, polyartritis)

KENMERKEN:

Immobilisatie en rust van de knie door de combinatie van anatomische klittenband gevoerd met verwijderbare spalken.

Maximaal comfort dankzij voering in geperforeerde spons.

CONTRA-INDICATIES:

- Deze brace is niet geschikt voor bepaalde vervormingen
- Ernstige afzettingen en/of aderontstekingen
- Mag niet rechtstreeks in contact staan met een huidletsel

GEBRUIK:

1 2 Strek uw been en doe de brace aan met het grootste deel naar het bovenbeen, en de deuk in het midden op de knie.

3 Span de klittenband voorzichtig aan.

Uw arts of gezondheidsprofessional moet de breedte (van de klittenband) instellen.

De patiënt moet deze hulpmiddel rechtstreeks over een kledingstuk te dragen.

VOORZORGSMAATREGELEN:

Volg het advies van de gezondheidsprofessional die het product heeft voorgeschreven of afgeleverd.

Raadpleeg bij twijfel over het gebruik of bij hinder uw gezondheidsprofessional.

De orthese is bedoeld voor persoonlijk gebruik.

Neem contact op met de fabrikant en de bevoegde autoriteit in geval van een ernstig incident dat ontstaat naar aanleiding van gebruik van dit hulpmiddel.

Houd u bij het weggooiën van het product strikt aan de wettelijke voorschriften in uw regio.

ONDERHOUD:

Met de hand wassen in water van 40° met een neutrale, zachte zeep.

Overvloedig spoelen zonder uit te wringen en horizontaal laten drogen, uit de buurt van een sterke warmtebron.

Niet strijken.

PRESENTATIE:




Zwart

3 maten: (lengte been)

- Maat 1: 40-50 cm
- Maat 2: 50-60 cm
- Maat 3: ≥ 60 cm

SAMENSTELLING:

Polyurethaan 48 % - Katoen 30 % - Polyamide 22 %

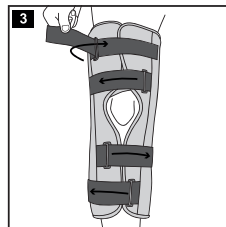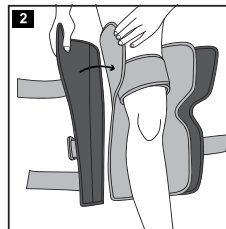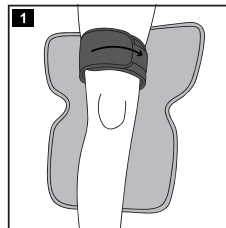

CIZETA MEDICALI France SAS
109, rue de la Brasserie - 18200 SAINT AMAND MONTROND
Tel. 02 48 96 87 93 - Fax. 02 48 96 80 91
www.cizetamedicali.fr

Capital social 684 000 €
SIRET 398 197 863 00069 APE 4646Z
N° TVA FR2398197863 RCS BOURGES B398 197 863



12/2023



SCIENCE & MEDICAL
QUALITY

PERFO UNI 3

FR

INDICATIONS :

- Traumatisme du genou
- Entorse
- Séquelle de fractures
- Maintien post-opératoire
- Mise au repos (arthrite, polyarthrite)

CARACTERISTIQUES :

Immobilisation et mise au repos du genou assurées par l'association d'un tissu auto agrippant découpé anatomiquement et doublé d'éclisses incorporées amovibles.

Confort optimum du fait d'une doublure bouclette éponge coton perforée.

CONTRE-INDICATIONS :

- Certaines déformations ne permettent pas la mise en place d'une attelle de série
- Importants cordons et/ou ulcères variqueux
- Ne doit pas être directement en contact avec une lésion cutanée

MISE EN PLACE :

1 2 La jambe tendue, positionner l'attelle, la partie la plus large vers la cuisse, l'échancrure centrée sur le genou.

3 Serrer sans excès à l'aide des sangles auto-agrippantes.

Le réglage de la largeur (bandes auto-agrippantes) sera réalisé par votre médecin ou votre applicateur.

Le patient doit porter ce dispositif directement sur un vêtement.

PRÉCAUTIONS :

Suivre les conseils du professionnel de santé qui a prescrit ou délivré le produit. En cas de doute sur l'utilisation ou d'inconfort, consulter votre professionnel de santé.

L'orthèse est à usage personnel.

Contacter le fabricant et l'autorité compétente en cas d'incident grave découlant de l'utilisation de ce dispositif. Pour jeter le produit, respectez strictement les réglementations légales de votre région.

ENTRETIEN :

Lavage à la main dans une eau à 40° avec un savon neutre, non agressif.

Rincer abondamment sans essorer et laisser sécher à plat,

à l'abri d'une source de chaleur excessive.

Ne pas repasser.

PRESENTATION :

Noir

3 Tailles : (Longueur de la jambe)

- Taille 1 : 40-50 cm
- Taille 2 : 50-60 cm
- Taille 3 : ≥ 60 cm

COMPOSITION :

Polyuréthane 48% - Coton 30% - Polyamide 22%



PERFO UNI 3

INDICATIONS:

- Knee trauma
- Sprain
- After-effects of fractures
- Post-surgical support
- Resting (arthritis, polyarthritis)

FEATURES:

Ensures immobilisation and resting of the knee by a combination of anatomically cut self-adhesive fabric coupled with integrated detachable splints.

Optimal comfort provided by a perforated cotton terry cloth lining.

CONTRAINDICATIONS:

- Some deformities cannot be accommodated by standard splints.
- Significant varicose veins and/or ulcers
- Must not come into direct contact with broken skin

FITTING THE DEVICE:

1 2 Put the splint in place on the extended leg, with the widest section at the thigh, and the recess centred over the knee.

3 Fasten without over-tightening, by means of the self-adhesive straps.

Your doctor or the person applying the device can adjust the width (self-adhesive bands).

The patient should wear this device directly on a garment.

PRECAUTIONS:

Follow the advice of the health professional who prescribed or supplied the product. If there is doubt regarding use, or discomfort, consult your health professional.

The orthotic device is for personal use.

Contact manufacturer and competent authority in case of a serious incident arising due to usage of this device.

To throw away the product, respect strictly the legal regulations of your region.

MAINTENANCE:

Hand wash in 40° water with mild, neutral soap.

Rinse thoroughly without spinning and lay flat to dry, away from excessive heat.

Do not iron.

PRESENTATION:

Black

3 Sizes: (Leg length)

- Size 1: 40-50 cm
- Size 2: 50-60 cm
- Size 3: ≥ 60 cm

MATERIALS:

Polyurethane 48% - Cotton 30% - Polyamide 22%

ENG

PERFO UNI 3

INDICAZIONI:

- Traumatismo del ginocchio
- Distorsione
- Postumi di fratture
- Contenimento post-operatorio
- Messa a riposo (artrite, poliartrite)

CARATTERISTICHE:

Immobilizzazione e messa a riposo del ginocchio assicurate dall'associazione di un tessuto auto-aggrappante tagliato anatomicamente e con rinforzi metallici incorporati amovibili.

Comfort ottimale grazie a una imbottitura della fibbia in spugna di cotone perforata.

CONTROINDICAZIONI:

- Certe deformazioni non permettono il posizionamento di una stecca di serie
- Importanti cordoni e/o ulcere varicosi
- L'ortesi non deve essere direttamente a contatto con una lesione cutanea

POSIZIONAMENTO:

1 2 Con la gamba tesa, posizionare la stecca, con la parte più larga verso la coscia, la rientranza centrale sul ginocchio.

3 Serrare senza esagerare con le cinghie auto-aggrappanti.

La regolazione della larghezza (bande auto-aggrappanti) sarà realizzata dal vostro medico o applicatore.

Il paziente deve indossare questo dispositivo direttamente su un indumento.

PRECAUZIONI:

Seguire i consigli del professionista sanitario che ha prescritto o consegnato il prodotto.

In caso di dubbio sull'utilizzazione o di disagio, consultare il professionista sanitario.

L'ortesi è a uso personale.

Contattare il produttore e l'autorità competente in caso di gravi incidenti dovuti all'uso di questo dispositivo.

Per gettare il prodotto, rispettare rigorosamente le norme di legge della propria regione.

MANUTENZIONE:

Lavare a mano in acqua a 40 °C con un sapone neutro, non aggressivo.

Risciacquare abbondantemente senza strizzare e lasciare asciugare a piatto

al riparo da una fonte di calore eccessiva.

Non stirare

PRESENTAZIONE:

Nero

3 Taglie : (Lunghezza della gamba)

- Taglia 1 : 40-50 cm
- Taglia 2 : 50-60 cm
- Taglia 3 : ≥ 60 cm

COMPOSIZIONE:

Poliuretano 48% - Cotone 30% - Poliammide 22%

IT

PERFO UNI 3

INDIKATIONEN:

- Knieverletzung
- Verstauchung
- Folgeerscheinung eines Knochenbruchs
- Postoperative Ruhigstellung
- Ruhigstellung (Arthritis, Polyarthritis)

EIGENSCHAFTEN:

Immobilisierung und Ruhigstellung des Knies durch die Kombination eines selbsthaftenden Gewebes mit integrierten, herausnehmbaren Schienen in anatomischem Schnitt

Optimaler Tragekomfort aufgrund eines perforierten Futters aus Baumwoll-Frottee

KONTRAINDIKATIONEN:

- Bestimmte Deformierungen lassen das Anlegen einer Schiene dieser Reihe nicht zu.
- Große Stammvarizen und / oder variköse Geschwüre
- Darf nicht direkt mit einer Hautverletzung in Berührung kommen

ANLEGEN:

1 2 Bei gestrecktem Bein die Schiene positionieren, den breiteren Teil auf den Schenkel und die Aussparung auf das Knie ausrichten.

3 Mithilfe der selbsthaftenden Gurte anziehen, ohne zu starken Druck auszuüben.

Die Einstellung der Weite (selbsthaftende Bänder) wird durch Ihren Arzt oder Fachhändler vorgenommen.

Der Patient sollte diesen Gerät direkt über einem Kleidungsstück zu tragen.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Die Empfehlungen der medizinischen Fachkraft, die das Produkt verordnet oder geliefert hat, befolgen. Bei Zweifeln in Bezug auf die Anwendung oder wenn das Tragen der Orthese unangenehm ist, wenden Sie sich an Ihre medizinische Fachkraft.

Die Orthese ist zum persönlichen Gebrauch bestimmt.

Den Hersteller und die zuständige Behörde benachrichtigen, falls es durch die Verwendung dieses Produkts zu einem schwerwiegenden Vorfall kommt.

Halten Sie sich bei der Entsorgung des Produkts strikt an die gesetzlichen Bestimmungen in Ihrer Region.

WARTUNG:

Handwäsche in Wasser bei einer Temperatur von 40°, mit einer milden Neutralseife.

Gründlich spülen, nicht schleudern und liegend trocknen lassen, eine starke Wärmequelle vermeiden.

Nicht bügeln.

VERFÜGBARE MODELLE:

Schwarz

3 Größen: (Beinlänge)

- Größe 1: 40-50 cm
- Größe 2: 50-60 cm
- Größe 3: ≥ 60 cm

ZUSAMMENSETZUNG:

Polyurethan 48 % - Baumwolle 30 % - Polyamid 22 %

D

