


GIPSSCHOEN

NL

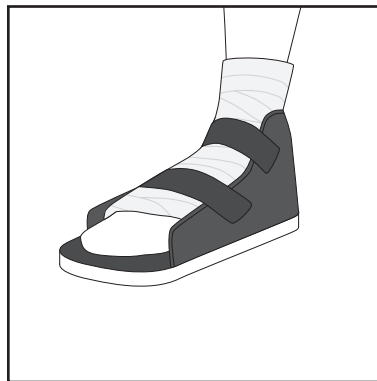

INDICATIES:

- Postoperatieve schoen
- Bescherming van gips bij verplaatsingen

KENMERKEN:

Antislipzool.
Bescherming van gips bij verplaatsingen.
Sluiting met klittenband.
Bilateraal model.

CONTRA-INDICATIES:

- Mag niet rechtstreeks in contact staan met een huidletsel

GEBRUIK:


Open de klittenbandsluitingen.
Steek uw voet in de schoen.
Sluit de klittenband en trek aan.
De patiënt moet deze hulpmiddel rechtstreeks over een kledingstuk te dragen.

VOORZORGSMAATREGELEN:

Volg het advies van de gezondheidsprofessional die het product heeft voorgeschreven of afgeleverd.
Raadpleeg bij twijfel over het gebruik of bij hinder uw gezondheidsprofessional.
De orthese is bedoeld voor persoonlijk gebruik.
Neem contact op met de fabrikant en de bevoegde autoriteit in geval van een ernstig incident dat ontstaat naar aanleiding van gebruik van dit hulpmiddel.

ONDERHOUD:

Met de hand wassen in water van 40° met een neutrale, zachte zeep.
Overvloedig spoelen zonder uit te wringen en horizontaal laten drogen, uit de buurt van een sterke warmtebron.
Niet strijken.

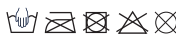

PRESENTATIE:

Zwart
4 maten: (schoenmaat)
- Maat 1: 33-35
- Maat 2: 35-40
- Maat 3: 40-44
- Maat 4: 44-46

SAMENSTELLING:

Polyester 40% - Polyurethaan 30% - Polyamide 20% - Rubber 10%

CIZETA MEDICALI France SAS
109, rue de la Brasserie - 18200 SAINT AMAND MONTROND
Tel. 02 48 96 87 93 - Fax. 02 48 96 80 91
www.cizetamedicali.fr

Capital social 84 000 €
SIRET 398 197 863 00069 APE 4646Z
N° TVA FR92398197863 RCS BOURGES B398 197 863



03/2022



SCIENCE & MEDICAL
QUALITY

CHAUSSURE PLÂTRE

FR

INDICATIONS :

- Post-opératoire sous plâtre
- Protection des plâtres lors des déplacements

CARACTERISTIQUES :

Semelle antidérapante.
Protection des plâtres lors des déplacements.
Fermeture par sangles auto-agrippantes.
Modèle bilatéral.

CONTRE-INDICATIONS :

- Ne doit pas être directement en contact avec une lésion cutanée

MISE EN PLACE :

Ouvrir les fermetures auto-agrippantes.
Enfiler le pied dans la chaussure.
Refermer et fixer les fermetures auto-agrippantes.
Le patient doit porter ce dispositif directement sur un vêtement.

PRECAUTIONS :

Suivre les conseils du professionnel de santé qui a prescrit ou délivré le produit. En cas de doute sur l'utilisation ou d'inconfort, consulter votre professionnel de santé.
L'orthèse est à usage personnel.
Contacter le fabricant et l'autorité compétente en cas d'incident grave découlant de l'utilisation de ce dispositif.

ENTRETIEN :

Lavage à la main dans une eau à 40° avec un savon neutre, non agressif.
Rincer abondamment sans essorer et laisser sécher à plat, à l'abri d'une source de chaleur excessive.
Ne pas repasser.



PRESENTATION :

Noir
4 Tailles : (Pointure)
-Taille 1 : 33-35
-Taille 2 : 35-40
-Taille 3 : 40-44
-Taille 4 : 44-46

COMPOSITION :

Polyester 40% - Polyuréthane 30% - Polyamide 20% - Caoutchouc 10%

PLASTER CAST SHOE

INDICATIONS:
- Following surgery, while wearing a cast
- Cast protection in moving around

FEATURES:
Skidproof sole.
Cast protection in moving around
Self-adhesive closing straps.
Model fits either foot.

CONTRAINDICATIONS:
- Must not come into direct contact with broken skin

FITTING THE DEVICE:
Open the self-adhesive closing straps.
Put your foot into the shoe.
Close and fasten the self-adhesive closing straps.
The patient should wear this device directly on a garment.

PRECAUTIONS:
Follow the advice of the health professional who prescribed or supplied the product. If there is doubt regarding use, or discomfort, consult your health professional.
The orthotic device is for personal use.
Contact manufacturer and competent authority in case of a serious incident arising due to usage of this device.

MAINTENANCE:
Hand wash in 40° water with mild, neutral soap.
Rinse thoroughly without spinning and lay flat to dry, away from excessive heat.
Do not iron.

PRESENTATION:
Black
4 Sizes: (Shoe Size)
-Size 1: 33-35
-Size 2: 35-40
-Size 3: 40-44
-Size 4: 44-46

MATERIALS:
Polyester 40% - Polyurethane 30% - Polyamide 20% - Rubber 10%

ENG

CALZATURA GESSO

INDICAZIONI:
- Post-operatorio sotto gesso
- Protezione dei gessi nel corso degli spostamenti

CARATTERISTICHE:
Suola antiscivolo
Protezione dei gessi nel corso degli spostamenti
Chiusura mediante cinghie auto-aggrappanti.
Modello bilaterale.

CONTROINDICAZIONI:
- L'ortesi non deve essere direttamente a contatto con una lesione cutanea

POSIZIONAMENTO:
Aprire le chiusure auto-aggrappanti
Infilare il piede nella scarpa.
Richiudere e fissare le chiusure auto-aggrappanti.
Il paziente deve indossare questo dispositivo direttamente su un indumento.

PRECAUZIONI:
Seguire i consigli del professionista sanitario che ha prescritto o consegnato il prodotto. In caso di dubbio sull'utilizzazione o di disagio, consultare il professionista sanitario.
L'ortesi è a uso personale.
Contattare il produttore e l'autorità competente in caso di gravi incidenti dovuti all'uso di questo dispositivo.

MANUTENZIONE:
Lavare a mano in acqua a 40 °C con un sapone neutro, non aggressivo.
Risciacquare abbondantemente senza strizzare e lasciare asciugare a piatto al riparo da una fonte di calore eccessiva.
Non stirare

PRESENTAZIONE:
Nero
4 Taglie: (Misura)
- Taglia 1: 33-35
- Taglia 2: 35-40
- Taglia 3: 40-44
- Taglia 4: 44-46

COMPOSIZIONE:
Poliestere 40% - Poliuretano 30% - Poliammide 20% - Caucciù 10%

IT

GIPSSCHUH

INDIKATIONEN:
- Postoperative Behandlung in Gips
- Gipsschutz beim Gehen

EIGENSCHAFTEN:
Rutschfeste Sohle
Gipsschutz beim Gehen
Verschluss durch selbsthaftende Riemen
Beidseitig einsetzbar

KONTRAINDIKATIONEN:
- Darf nicht direkt mit einer Hautverletzung in Berührung kommen.

ANLEGEN:
Die selbsthaftenden Verschlüsse öffnen.
Den Fuß in den Schuh einführen.
Die selbsthaftenden Verschlüsse wieder schließen und festziehen.
Der Patient sollte diesen Gerät direkt über einem Kleidungsstück zu tragen.

VORSICHTSMASSNAHMEN:
Die Empfehlungen der medizinischen Fachkraft, die das Produkt verordnet oder geliefert hat, befolgen. Bei Zweifeln in Bezug auf die Anwendung oder wenn das Tragen der Orthese unangenehm ist, wenden Sie sich an Ihre medizinische Fachkraft.
Die Orthese ist zum persönlichen Gebrauch bestimmt.
Den Hersteller und die zuständige Behörde benachrichtigen, falls es durch die Verwendung dieses Produkts zu einem schwerwiegenden Vorfall kommt.

WARTUNG:
Handwäsche in Wasser bei einer Temperatur von 40°, mit einer milden Neutralseife.
Gründlich spülen, nicht schleudern und liegend trocknen lassen, eine starke Wärmequelle vermeiden.
Nicht bügeln.

VERFÜGBARE MODELLE:
Schwarz
4 Größen: (Schuhgröße)
- Größe 1: 33-35
- Größe 2: 35-40
- Größe 3: 40-44
- Größe 4: 44-46

ZUSAMMENSETZUNG:
Polyester 40% - Polyurethan 30% - Polyamid 20% - Kautschuk 10%

D

